

SOke 广州市授科仪器科技有限公司

实验室分析仪器 生物与制药仪器 耗材试剂

更低价格

更多值得

同质价更低

同价质更高

授科专业的

“精明眼”

总能为您提供性
价比最高的产品

！为您缩减成本

www.soke17.com



您不用担心

一切售后问题


“都包在我们身上”

契约精神

始终如一的恪守诚信是最重要的，说到做到才能最终赢得客户的支持。我们销售的不仅是产品，更是一套完整的服务，一套用我们的专业创造更多附加值的服务。

庞大的客户群体，经验丰富的售后工程师

授科目前已经拥有超过 8000 家用户，其中不乏世界 500 强企业以及著名企业、研究所、权威机构。公司拥有标准化的流程，以及严谨的工作态度，可以保证为每一个用户提供最完善的售前、售中、售后的专业化服务。销售人员都是经过严格的专业培训，售后服务团队有 10 多年的现场服务经验，在某些领域的服务经验我们比生产厂家的工程师更加杰出。

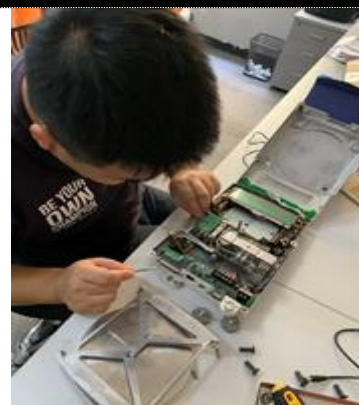

1



S-Service 服务
标准化服务体系



T-Technology 技术
一流的技术服务团队



P-Product 产品
品种齐全，省钱省心

实验室仪器目录

1	德国赛多利斯天平, PH 计, 移液器, 针头滤器, 过滤器, 超滤离心管, 超滤膜包	第 3 页
2	英国艾德姆电子天平, 快速水份仪, 天平减震台	第 3 页
3	实验室超纯水机	第 4 页
4	卡尔费休水分仪、自动电位滴定仪	第 4-5 页
5	离心机	第 5 页
6	紫外可见分光光度计, 原子吸收分光光度计, 原子荧光光度计	第 6 页
7	高压蒸汽灭菌器	第 6 页
8	生物安全柜, 洁净工作台, 浮游菌采样器, 尘埃粒子计数器, 风量罩	第 6-7 页
9	显微镜	第 7 页
10	干燥箱, 恒温恒湿箱, 药品稳定性试验箱, 光照培养箱, 霉菌培养箱	第 8 页
11	二氧化碳培养箱, 振荡培养箱, 摇床	第 9 页
12	多参数水质检测仪	第 9 页
13	意大利哈纳 HANNA 酸度计、电导率仪、溶氧仪	第 9 页
14	TOC 总有机碳分析仪	第 10 页
15	凯氏定氮仪	第 10 页
16	冷冻干燥机	第 10-11 页
17	实验室洗瓶机	第 11 页
18	激光粒度仪	第 11 页
19	傅里叶变换红外光谱仪	第 12 页
20	热重分析仪 (TGA), 差示扫描量热仪/差热分析	第 12 页
21	熔点仪	第 12 页
22	折光仪, 旋光仪	第 13 页
23	密度计	第 13 页
24	色差仪	第 13 页
25	气相色谱仪, 气-质联用仪 (GC-MS)	第 14 页
26	液相色谱仪	第 14 页
27	离子色谱仪	第 15 页
28	微波消解仪	第 15 页
29	气体发生器	第 16 页
30	超声波细胞粉碎机, 高通量组织研磨仪, 高压均质机	第 16 页
31	旋转蒸发仪	第 17 页
32	氮吹仪	第 17 页
33	微生物限度检查仪, 集菌仪	第 18 页
34	药物溶出仪	第 18 页
35	磁力搅拌器, 分散均质机	第 19 页
36	酶标仪/洗板机, PCR 仪	第 19 页
37	电泳仪, 凝胶成像分析系统, 化学发光成像分析系统	第 20 页
38	液氮罐, 超低温冰箱	第 20 页
40	拉力试验机	第 21 页
41	电化学工作站	第 21 页
42	示波器, 万用表	第 22 页
43	实验室试剂耗材, 小型仪器	第 22-23 页



德国赛多利斯产品系列

赛多利斯电子天平、PH 计



纯水机耗材



赛多利斯移液器、吸头、助吸器



针头滤器



负压过滤器

是对 20 ml 至 1 L 培养基或缓冲液进行除菌过滤的方便之选。



超滤离心管

截留分子量从 3kDa 至 1000kDa 可以选择，处理量可达 20ml



超滤膜包

可对最多 5 L 初始体积大分子样品进行澄清、浓缩或缓冲液置换。



Since 1972 “世界天平之子”

EAADAM

英国艾德姆

英国艾德姆电子天平、水份仪、防水秤、工业称、计数秤、检重台秤、天平台

分析天平 (0.1mg)

量程范围 80 g 至 510 g 之间



半微量天平 (0.01mg)

型号	量程 (g)	精度(mg)
EAB225i	80 220	0.01 0.1
EAB125i	60 120	0.01 0.1
SAB225i	80 220	0.01 0.1
SAB125i	60 120	0.01 0.1

快速水份测定仪



精密天平

精密天平的可读性介于 1 mg 和 1 g 之间，最大量程高达 15 kg。



大量程天平

型号	量程 (g)	精度(g)
LBL12001e/p	12Kg	0.1g
LBL16001e/p	16Kg	0.1g
LBL22001e/p	22Kg	0.1g
LBL32001e/p	32Kg	0.1g

*P 为带立杆型号

*称盘大小: 400x300mm

工业秤

量程从 8Kg 到 600Kg，表头可达到 IP68 级防水标准。



S-Service 服务
标准化服务体系




T-Technology 技术
一流的技术服务团队



P-Product 产品
品种齐全，省钱省心

实验室超纯水机

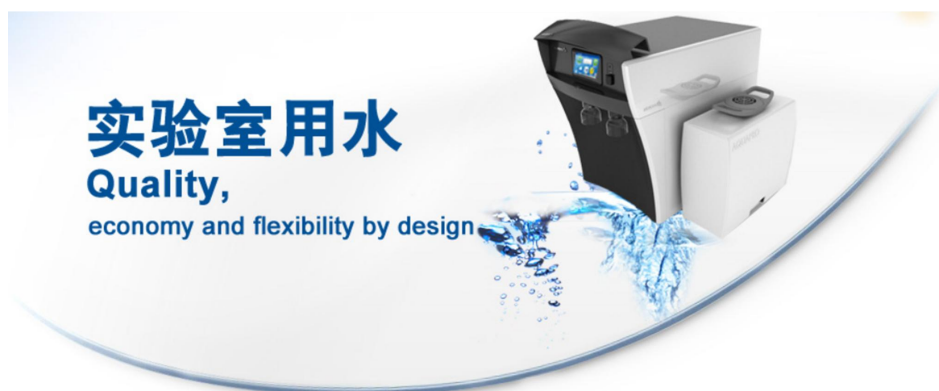

纯水超纯水一体机	超纯水机	大水量超纯水机	经济型超纯水机
自来水进水，两级反渗透产水量（25℃）最大可达 30L/h，超纯水产水量最大可达 30,000L，超纯水取水流量最大 2L/min	纯水进水，超纯水产水量最大可达 30,000L，超纯水取水流量最大 2L/min	两级反渗透产水量（25℃）最大可达 60L/h 120L/h，自来水进水	有众多经济型超纯水机可供选择，价格实惠，质量保证，具体请咨询

全自动卡尔费休水分测定仪

容量法卡尔费休水分测定仪	库仑法微量水分测定仪
测量范围 10ppm-100%水， 分辨率 1ppm 极化电流 $\pm 1000\text{mV}$ 最小进液 $2\mu\text{L}$，滴定管 20ml 滴定管精度 1/20000 重复性 $\geq 99.7\%$ (10mg 水) 最大误差 $< 1\%$ 特色功能 自定义终点延迟、滴定延迟；一键清洗；电流实时显示 4.3 英寸超大 LCD 显示屏	测量范围 $1\mu\text{g}$ ---200mg 水； 相对含水量范围：1ppm-100%,显示精度 0.001ppm 分辨率 $0.1\mu\text{g}$ 水 电解速度 $2.8\text{mg H}_2\text{O}/\text{min}$ (最大) 电极电流 0-500mA 无极调节 测量误差 $3\mu\text{g}$ ($10\mu\text{g}$--$100\mu\text{g H}_2\text{O}$) ; $\leq 0.3\%$ (含水量 $> 100\mu\text{g H}_2\text{O}$) 方法公式 5 种方法可选，8 种计算公式，样品单位 ppm, %, mg/L, mg/kg 可以随意切换 重复性 $\geq 99.7\%$ (10mg 水)
使用环境温度 $+5 \sim +40^\circ\text{C}$; 湿度 $< 80\%$ 进口的一体化电磁三通阀，将阀体内的死体积降至最低，液路切换速度只需百分之一秒。解决了传统三通阀漏液的问题，出口压力达到 100kPa，即使管路堵塞也无需担心三通阀漏液	进样延时 0-9999 自定义 电解时间 0-9999 自定义 (0 为不限制电解时间) 5.7 寸电容触摸屏 数据存储 500 条 校准功能 校正系数；终点电位；空白扣除多重结果校准功能

全自动电位滴定仪

电位滴定仪典型应用：食品中酸价测定 水泥中氯离子的测定，食品中过氧化值测定，食品中还原糖测定，玉米粉中脂肪酸值测定，游离脂肪酸测定，中药半夏中琥珀酸含量测定，土壤中有机质测定，废水中 COD 测定，表面活性剂测定，电解液测定，硫醇硫测定。

经济型自动电位滴定仪



进口电磁阀，PTFE 耐腐蚀滴定管，大功率搅拌台，采用线圈实现磁力搅拌

高精度闭环控制，确保精确滴定

高精度滴定管精确到 0.003mm

整体管路全密封设计，更换快捷方便

7 寸彩色液晶触摸界面，显示滴定曲线和测量结果

支持酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定方法

符合 GMP 规范，滴定结果符合 GLP 要求

自动上样，自动清洗管路，自动测出实验结果。

多通道全自动电位滴定仪



多通道模块化组合，可组合多个加液单元；支持 4 个加液单元同时工作，自由化组合，无需安装拆卸部件，各模块简单并排即可组建仪器系统

• 加液标准滴定管 4 种规格任意选择，实验应用更有针对性；标配 10mL, 选配 1mL、5mL、25mL

• 内置式加液单元，多重保障试剂溢出危险；

• 具备审计追踪功能，对仪器进行的有效操作后台都会记录且不可删除

• 支持手动设置终点并另存为关联数据

进样器样品个数：配 1 位独立分析台，可选 16 位 100mL 自动进样器、12 位 250mL 自动进样器、18 位 50mL 自动进样器

离心机

低速大容量冷冻离心机

一次可分离 400ml 三联袋或四联袋 12 个，可配 2400ml 离心瓶



高速冷冻离心机

转子采用新型高分子纤维材料制成，角转子的重量仅为传统转子的一半。



台式高速离心机

最高转速：16500rpm 或更高



低速台式离心机

最高转速 6500rpm，最大相对离心力 5091×g，最大容量 4×250ml



掌上迷你离心机

转速 500~12000rpm ± 5%，转速步增 500rpm，最大相对离心力 9660×g



真空离心浓缩仪

内置真空泵提供的真空作用来进行溶剂的蒸发，来达到样品的浓缩。



紫外可见分光光度计，原子吸收分光光度计，原子荧光光度计

紫外可见分光光度计	原子吸收分光光度计	双通道原子荧光光谱仪
单光束、双光束、比列双光束，自动扫描，光源除传统的氘灯、钨灯外，还有新款的脉冲氙灯作为光源，即开即用、无需预热。	分为单火焰法、石墨炉法、火焰石墨炉一体机，波长范围:190-900nm 光源:根据产品灯位自动切换转塔，自动准直。	检出限 DL: As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn <0.01 $\mu\text{g/L}$ Hg、Cd <0.001 $\mu\text{g/L}$ Ge <0.05 $\mu\text{g/L}$ Zn <1.0 $\mu\text{g/L}$ Au <3.0 $\mu\text{g/L}$ 可选配原子荧光自动进样器
		

高压蒸汽灭菌器

全自动高压蒸汽灭菌器	立式压力蒸汽灭菌器（内循环）	手提式压力蒸汽灭菌器
手动上下开关式，有安全锁结构.无蒸汽外泄，可选配烘干功能。	全自动内循环，手轮平移式快开结构，可选配干燥系统。	快开式结构，电加热方式。温度选择范围 105-126℃，额定工作压力 0.14-0.16Mpa
		

洁净工作台，生物安全柜

A2 半排型生物安全柜（30%外排）	B2 全排型生物安全柜（100%外排）	超净工作台
  通过气体流入提供操作员保护，通过工作区域内的 HEPA 过滤的层流下降气流产品保护（30%排气；70%再循环），通过 HEPA 过滤排气提供了环境保护。 紫外线防护的安全防反射前窗，下边缘没有视线遮挡 带过滤器加载自补偿的微处理器控制 显示层流速度和过滤器堵塞程度的主屏幕 带有颜色代码的控制面板，用于指示安全柜状态 带定时器的可编程紫外线灯和风扇	 ◆ 气流模式：100%外排，0 内循环。 ◆ 内部可清洗部位采用大圆角处理，便于清理。 ◆ 高效过滤器,针对 0.12 μm 颗粒系可以达到 99.9995%截流效率。 ◆ 具有紫外预约定时功能。 ◆ 前窗一体化滑动移门，可任意定位。前窗玻璃门采用不低于 6mm 厚安全钢化玻璃。 ◆ 10 度倾斜设计，更符合人体工程学动力 ◆ 柜内电源：防水插座设计，整机具有断电保护功	 垂直送风  水平送风

浮游菌采样器，尘埃粒子计数器，风量罩

浮游菌采样器



依据新版 GMP 规范要求，根据安德森撞击原理进行设计制造；外壳采用 304 材质，经表面拉丝工艺处理，没有卫生死角，便于清洁灭菌。采样器采样头为 SUS304 不锈钢材质，共计 397 个孔，直径 $\phi 0.6\text{mm}$ 微孔（直孔，无倒角），减少了细菌重叠，降低了微生物计数错误。

电池使用时间： ≥ 5 小时

执行标准：ISO 14698-1

适合培养皿尺寸（直径）：90mm

采样头材质：SUS304

尘埃粒子计数器



配备了 8 寸彩色液晶触摸屏，产品采用进口优质气泵，噪音更低，电磁干扰更小；外形设计大气简介，使用方便，全不锈钢外壳更能符合 GMP 的要求。

电池充电时间：6 小时

工作时间：连续测试时间 5 小时左右

激光光源：长寿命的激光二极管，使用寿命 10 年

粒径范围：0.3-10 μm

粒径通道：0.3、0.5、1、3、5、10 (μm)

风量罩



风速测量范围：100~4000m3/h

风速测量精确度： $\pm 5\%F.S$

风量分辨率：1m3/h

压力测量范围：-100~+450 Pa

压力测量精确度：0~100 Pa, 1.0%

满量程 100~450 Pa, 3.5%读数

压力分辨率：0.01Pa

温度量程：0~+100 $^{\circ}\text{C}$

温度精确度： $\pm 2\%$ 满量程

温度分辨率：0.1 $^{\circ}\text{C}$

单位模式：m3/h L/s

压力分辨率：0.01Pa

数据存储数量：10000 条

电池使用时间： ≥ 5 小时

显微镜

生物显微镜

采用无限远独立消色差光学的正置显微镜，采用高质量的平场消色差物镜和 10X/23 宽视野目镜



生物倒置显微镜

大视野目镜,长工作距离平场消色差物镜，配有相衬装置，可观察在培养皿和培养瓶中未经染色的透明活体。



金相显微镜

主要应用于半导体、FPD、电路板、金属材料、精密刀具等制造领域，适用于教学及研究方面。



透反射偏光显微镜

亦称矿相显微镜或矿石显微镜,是利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的必备仪器。




体视显微镜

高品质光学成像，超薄型透反射式 LED 光源，照明均匀，长寿耐用，标准 1X 物镜有效工作距离达到 105mm



正置/倒置荧光显微镜

6 孔转盘式荧光模块设计，荧光激发块更换拆除方便,荧光可供选择的荧光波段繁多且亮度高

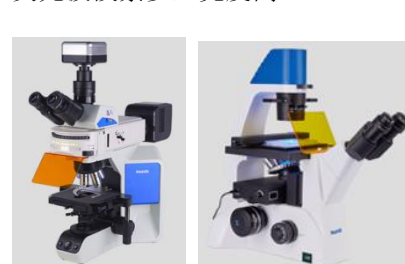

干燥箱，生化培养箱，恒温恒湿箱，药品稳定性试验箱，光照培养箱，人工气候箱，霉菌培养箱，马弗炉，电热套

干燥箱

鼓风干燥箱，电热恒温干燥箱，使用温度范围 RT+10-300℃



真空干燥箱

专为干燥热敏性、易分解、易氧化的物质设计，可惰性气体冲入。



生化培养箱

-10-65℃，水分析、BOD/细菌霉菌微生物培养、植物育种栽培等



光照培养箱

微生物、细胞组织、育苗、昆虫、小动物的光照培养。使用温度范围无光照：0~65℃；有光照：10~65℃ 内容积 250L 350L 450L



人工气候箱

精确湿度控制下的微生物、细胞组织、育苗、昆虫、小动物的光照培养 使用温度范围 无光照：0~65℃；有光照：10~65℃ 控湿范围 40%~95%RH 内容积 250L 350L 450L



霉菌培养箱

需要湿度的恒温实验及环境试验，使用温度范围 无加湿：0~65℃；有加湿：10~65℃ 控湿范围 45%~95%RH 内容积 70L 150L 250L 杀菌灯：标配无臭氧型



恒温恒湿箱

湿度范围的恒温实验及环境试验。使用温度范围 无加湿：0~65℃；有加湿：10~60℃ 控湿范围 45%~95%RH 内容积 70L 150L 250L 方式强制对流



陶瓷纤维马弗炉

最高 1700℃(长期最高连续使用温度 1650℃) 内容积 2L 4L 8L 12L 20L 36L 炉膛体：耐高温多晶莫来石纤维



电热套

数显电热套，控温范围：室温+20~250℃；数字控温磁力搅拌电热套，控温范围室温+20~250℃ 调速范围 0~1600rpm



二氧化碳培养箱，二氧化碳振荡培养箱，三气振荡培养箱，光照振荡培养箱，恒温恒湿振荡培养箱，摇床

二氧化碳培养箱	CO2 恒温振荡培养箱	叠加式恒温振荡培养箱	立式恒温振荡器、摇床
触摸屏，可堆叠放置（二层），配备高效微生物过滤器，针对直径大于等于 0.3μm 的颗粒，过滤效率高达 99.99%	应用于细胞培养、发酵、杂交、生物化学以及酶和细胞组织的科学研究。广泛应用于生命科学等领域。	该设备广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应及酶、细胞组织研究等。	振荡方式：回旋 回旋频率范围（rpm）0，20-450（可做静态培养，正反转）
			 
			多种振幅的立式恒温振荡培养设备

多参数水质分析仪

多参数水质快速测定仪	浊度测定仪	BOD5 测定仪(无汞压差)
支持 COD、氨氮、总磷、总氮、重金属、无机盐等数十种常规参数测定。	无需试剂，取样即测，测定快速，无需任何专业知识。	使用无汞压差感测法（呼吸法）测量水中的 BOD5，安全可靠
		

意大利哈纳 HANNA 酸度计、电导率仪、溶氧仪

台式 PH 计/电导率/溶解氧仪，可充电平板式大屏幕	HI8424 便携式 pH 计 HI8733 便携式电导率仪	荧光法溶解氧 DO-饱和和溶解氧测定仪
 专用座充及电极支架 电容式触摸按键 HI2002 酸度计，HI2003 电导率仪 HI2004 溶解氧测定仪	 HI8424 便携式 pH 计 自动识别一点或两点校准，内置三个标准校准点：4.01、7.01、10.01pH  HI8733 电导率仪 电导率【EC】：0.0 to 199.9、0 to 1999 μS/cm、0.00 to 19.99、0.0 to 199.9mS/cm	 HI98198 采用光学荧光（OPDO）测量方法，以确溶解氧测量的准确性，通过内置标准方法和标准，可以轻松地测量溶解氧 DO、生化耗氧量 BOD、耗氧速率 OUR、比耗氧速率 SOUR、无需进行复杂计算。

TOC 总有机碳分析仪

湿式氧化 TOC 分析仪



用紫外线（UV）对缓慢流动的水样进行氧化，样品中的有机物被氧化成 CO_2 ， CO_2 的测定采用电导率检测技术，通过对氧化前后水样电导率的变化来得到水样的总有机碳值。
紫外过硫酸盐氧化、NDIR 检测、清洁验证首选设备、审计追踪
可搭配 20 位自动进样器自主进样

燃烧法 TOC 分析仪



通过燃烧炉中的高性能氧化催化剂将样品在高温下充分燃烧分解成二氧化碳和水，水蒸气通过冷凝器冷却后除去，二氧化碳用非分散红外检测器（NDIR）测定，从而确定样品中总碳 TC 的含量；通过酸试剂将样品中无机碳分解成二氧化碳和水，水蒸气通过冷凝器冷却后除去，二氧化碳用非分散红外检测器（NDIR）测定，从而确定样品中总无机碳 TIC 的含量；总有机碳 $\text{TOC} = \text{TC} - \text{TIC}$ 。
680℃ 催化氧化技术，具备更高的催化效率和更长的使用寿命，检测效果更佳，可选配 20 杯位自动进样器

凯氏定氮仪

全自动凯氏定氮仪（自动滴定）

半自动凯氏定氮仪（手工滴定）

半自动机型采用国际通用的凯氏定氮法对含氮样品进行自动蒸馏，自动蒸馏、自动冷凝、自动淋洗，校准功能：稀释水校准、碱溶液校准、硼酸溶液校准、淋洗水校准。
全自动机型是基于经典的凯氏定氮法而设计的全自动蒸馏、滴定测氮系统，高精度耐腐加液泵和直线电机微控滴定系统确保实验结果的准确性。

测定范围 0.1mg-240mg 氮



冷冻干燥机（冻干机）

普通型冷冻干燥机

结构紧凑，进口压缩机提供高度自动化的高品质冷冻干燥环境（常规空载 -56℃，可选 -80℃，3kg）。



压盖型冻干机

点状加热升温曲线计算方式，在实验型冷冻干燥机上实现加热功能，（常规空载 -56℃，可选配 -80℃ 压缩机）。



普通多歧管型冻干机

结构紧凑，进口压缩机提供高度自动化的高品质冷冻干燥环境（常规空载 -56℃，可选 -80℃，3kg）。



压盖多歧管型冻干机

(常规空载-56℃, 可选配-80℃压缩机)。加热式钟罩冷冻干燥机功能丰富、操作方便, 具备智能存储, 数据管理等功能。



T 型架型冷冻干燥机

T 型架型冷冻干燥机标配 24 只橡胶密封阀, 可挂广口瓶 24 只、或茄型瓶 24 只。采用先进的进口压缩机 (常规空载-56℃, 可选配-80℃压缩机)




中试型圆仓方管硅油加热原位冷冻干燥机

采用 SUS304 方管拼接而成, 采用硅油循环加热保证了隔板的制冷与加热对物料的均匀性, 冷阱和冻干舱一体化设计减少设备体积



全自动器皿清洗机——实验室洗瓶机

用于实验室清洗、润洗、烘干三角瓶、容量瓶、试管、烧杯、移液管、色谱进样瓶等常规实验器皿, 可用于一切需要器皿清洗的相关行业实验室。

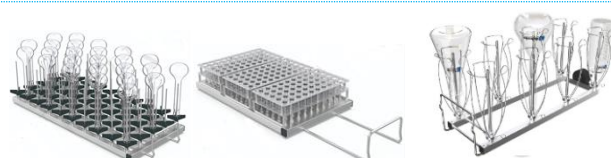

清洗篮架: 可按照您实验室具体器皿的种类、尺寸大小、个数进行订制。

材料及外观:

316L 级不锈钢内胆 (经钝化处理) 及 304 级不锈钢外壳, 双层隔热玻璃门设计, 内置防水照明装置

干燥系统: 管路注射式干燥系统, 双重喷淋蒸汽冷凝系统, 双蒸汽冷凝器压缩风机系统, 双重烘干, 保证烘干效率

激光粒度分析仪

湿法激光粒度分析仪




全内置湿法循环分散系统, 解决大颗粒在管道中沉积的难题。将超声波分散、机械搅拌、循环通道合理的集于仪器内部, 保证颗粒测试过程中的均匀分散和分布, 有效地避免了外置分散系统因管路长而导致的颗粒分布不均匀、大颗粒沉积等不良现象。

干法激光粒度分析仪



采用空气作分散介质, 适用于任何干粉物料, 特别是和水发生化学反应以及在液体中发生形态变化的颗粒, 可用于研究机构 and 企业的科学研究、新品开发、产品检测和质量控制。分散系统关键部位采用耐磨陶瓷, 不仅提高了使用寿命, 而且还保证测试结果更加准确和稳定。

干湿一体激光粒度分析仪

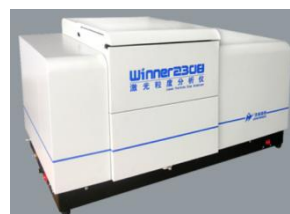

将湿法与干法测试集成于一体, 成功解决了干湿法一体化的各项技术问题, 实现干湿一键切换, 是颗粒测试、研究的优选。使用大功率循环泵, 对管路进行优化设计, 使整体控制协调性达到很高水平, 有效的防止了大颗粒的二次沉淀。



S-Service 服务
标准化服务体系



T-Technology 技术
一流的技术服务团队



P-Product 产品
品种齐全, 省钱省心

傅里叶变换红外光谱仪



广泛应用于疾控、制药、基础科研、精细化工、电子电气、石化冶炼及第三方检测等领域。


—高强度红外光源模块设计

通过对红外光源进行优化设计，本底能量值相比 FTIR-650 提高达 50%，显著增强了低频及高频波段区域红外辐射能量，使得全波段（7800~350cm⁻¹）能量分布更加均衡。

—高性能干涉仪模块设计

在继承角镜型干涉仪稳定性优点的同时，进一步对光学系统做了优化，使 FTIR-650S 拥有优于 45000:1 的信噪比，相比 FTIR-650 对应信噪比数值提升达 50%，可以更好地满足实践中对常规弱信号探测的应用需求。

热重分析仪 (TGA)

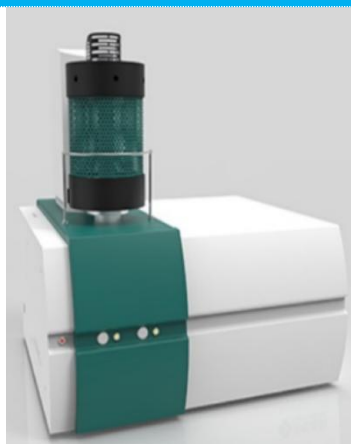

是一种利用热重法检测物质温度-质量变化关系的仪器。热重法是在程序控温下，测量物质的质量随温度（或时间）的变化关系。

热重法所测的性质包括腐蚀，高温分解，吸附/解吸附，溶剂的损耗，氧化/还原反应，水合/脱水，分解，黑烟末等。目前广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。

极好的扩展性:可与红外分析仪 (FTIR)、质谱仪 (MS)、气相色谱仪 (GC) 联用

真空度: 2.66X10⁻²Pa

气氛控制: 双路稳压稳流控制, (可定制各种耐腐蚀性气氛控制系统)

坩埚: 标配氧化铝 0.06ml 或 0.12ml, 选配铝坩埚、铜坩埚、铂金坩埚、石英坩埚、石墨坩埚

恒温水浴(选配): 温度准确度±0.1℃

恒温控制器(选配): 质谱连接头、控制器温度范围 0~400℃

差示扫描量热仪/差热分析



在程序控制温度下，测量物质与参比物之间的温度差与温度的函数关系的仪器

研究材料如下特性: 用于研究物质的相变、分解、化合、脱水、吸附、解析、溶化、凝固、升华、蒸发等现象及对物质作鉴别分析、组分分析、热参数测定和动力学参数测定等

产品应用: 广泛用于化学、物理学、地质学、生物学等基础科学领域的研究和化工、冶金、地质、电工、陶瓷、轻纺、食品、医药、农林、消防等行业的生产企业、科研单位及大专院校。

全自动视频熔点仪



全自动记录熔程，初熔，终熔

温度范围: 室温-420℃

检测方式: 全自动 (兼容手动)

处理能力: 4 个/批 (同时可以做四个样)

温度分辨率: 0.1℃

升温速率: 0.1℃--20℃

放大倍数: 8

用户管理个数: 20 个 分级管理

数据保存: 1000

图谱保存: 80

实验方案: 600 套

毛细管尺寸: 外径 Φ 1.4mm, 内径: Φ 1.0mm

全自动折光仪，阿贝折光仪，全自动旋光仪

全自动折光仪	阿贝折光仪	全自动旋光仪
- 内置帕尔贴(Peltier)精确控温系统 - 具备 20℃、25℃、40℃ 温度下蒸馏水校准 折 射 率 测 量 范 围 1.30000 ~ 1.70000(nD) Brix 测量范围 0~100.0%	波段：单波段 589.3nm 折射率 nD: 1.3000~1.7000 锤度 (Brix) 0~100% 测量分辨率 (nD): 0.0001 温度显示范围 (小示值 0.1℃): 0~50℃ 可外接循环器控温	测量范围: $\pm 89.99^\circ \pm 259^\circ Z$ 测量模式: 旋光度、比旋度、浓度、糖度 最小读数: 0.001° (旋光度) 光源: LED 冷光 工作波长: 589.3nm 可容纳 200mm 及以下的各种测量池
		

全自动密度计

采用 U 型管振荡法原理，有效结合帕尔贴精确控温技术和高清视频摄像技术，采用脉冲激发，方便用户准确快速测得样品密度及密度相关参数。 测试原理: 把少量样品注入可控制温度的试样管中，记录振动频率或周期，用事先得到的试样管常数计算试样的密度。试样管常数是用试样管充满已知密度标定液时的振动频率确定的。仪器在样品注入试样管后会直接显示密度值。	测试量程: 0-3g/cm ³ 进样容量: 手动注入约 2mL，自动泵进样约 4mL 进样方式: 注射器手动注入或由内置进样泵自动采样 密度分辨率: 0.00001g/cm ³ 重复性 ± 0.0001 g/cm ³ 准确性 ± 0.0003 g/cm ³ 控温范围: 5-45℃ 内置干燥吹气泵,每次清洗完成,可自动干燥样品管
--	---



色差仪、分光测色仪

分光色差仪系列	高精度台式分光测色仪	便携式分光测色仪
经济型色差仪，采用自动校准方式，拥有 30 余种测量参数和 26 种标准光源；该型号测量口径 8mm	在黑色物体的颜色测量上,在测量荧光和可见光上都有惊艳的展现，能与进口品牌维持优秀的一致性。	卧式设计，避免了手持操作时仪器的抖动，让测试更精准。
	高精度 	热销款 

气相色谱仪，气相色谱-质谱联用仪

气相色谱仪



气相色谱法是以气体为流动相的色谱分析方法，主要用于分离分析易挥发的物质。气相色谱法已成为极为重要的分离分析方法之一，在医药卫生、石油化工、环境监测、生物化学等领域得到广泛的应用。

● 不仅可连接质谱检测器，还可选配五种检测器，如 FID、TCD、FPD、ECD、NPD 等检测器，适合不同样品分析检测的需要。

气相色谱-质谱联用仪



多核并行处理技术，在高速扫描的情况下，快速获取复杂样品中各组份的定性定量信息，提升分析效率，实现快速 GC/MS 分析。

● 使用的四极杆是针对快速分析而设计的长杆结构，分辨率和质量轴稳定性好，提高离子传输效率。

● 检测器在整个质量范围（质量数高达 1100u）内具有高分辨率和长时间稳定性。

高效液相色谱仪

高效液相色谱仪



主要用于分析高沸点不易挥发的、受热不稳定的和分子量大的有机化合物的仪器设备。它由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。储液器中的流动相被高压泵打入系统，样品溶液经进样器进入流动相，被流动相载入色谱柱(固定相)内，由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数，在两相中做相对运动时，经过反复多次的吸附-解吸的分配过程，各组分在移动速度上产生较大的差别，被分离成单个组分依次从柱内流出，通过检测器时，样品浓度被转换成电信号传送到记录仪，数据以图谱形式打印出来。

高压泵：高精度梯度阀，保证梯度重复性；

柱温箱：加热-制冷双向风浴控温，控温柔和，受热均匀，稳定性高；提供 2 路“250mm 色谱柱+保护柱”安装位

液相色谱检测器



液相色谱常用的检测器包括紫外检测器、二极管阵列检测器、荧光检测器、示差折光检测器、蒸发光散射检测器等。

紫外检测器：高精度反射镜片,1800 线闪耀光栅,保证极低的杂散光和极大的线性范围。

二极管阵列检测器：可实现 190nm-800nm 范围内所有波长同时检测，信息量是紫外检测器的 1024 倍。

荧光检测器：以直流氙灯为光源，具备双单色器结构

示差折光检测器：长寿命 LED 光源，稳定加热控温模块，高灵敏度光电漏液报警器

蒸发光散射检测器：低温蒸发设计，满足热不稳定性物质检测需求；全新分流模式，雾化、蒸发、检测三路独立气流控制，满足不同特性物质分析；高性能光电倍增管，确保了较高的灵敏度。

离子色谱仪



模块化设计、灵活配置、功能强大

1. 色谱泵、淋洗液发生器、检测器、柱后衍生器均采用模块化设计，用户可按需选配；
2. 四元梯度泵和等度泵，实现高效分离；
3. 种类齐全的淋洗液发生器，发挥免试剂离子色谱系统优势；
4. 高效分析和检测模块，检测器/色谱分析区五区控温；
5. 分时进样、同时进样、在线富集自动进样器，实现从简单进样到复杂样品处理的自动操作。
6. 梯度精度和准确度较高，梯度精度 $\leq 0.2\%$ 。

灵活的检测器选择

1. 电导检测器、安培检测器、紫外检测器满足各领域各种样品的检测需求；
2. 超强的联用功能，轻松实现 IC 与 MS 联用。

功能强大的色谱工作站

1. 工作站界面简单、直观、操作流程便捷，具有充实的精细管理；
2. 数字信号接入，避免采集卡的采样误差，最大可四通道同时采集；

微波消解仪



微波消解作为一种高效的样品前处理方法，比传统的电加板加热速度快、加热均匀、试剂用量少、低空白、节能高效。密闭性系统对于易挥发元素的分析检测中可以很好的保持样品完整性，具备很高的样品回收率。目前已广泛应用于食品、纺织、地质、冶金、塑料、煤炭、化妆品、石油化工、生物医药、环境监测、污水处理、电池制造等领域。

6、8、10、12、24、40 位可选

- 消解罐自恢复式双重泄压结构，消解过程中遇超压泄压后，能自动还原密封状态，避免批次样品的报废及防止消解罐受损
- 高品质多重安全防护门、机械门锁、温度监测功能、过温及温度骤升保护功能、压力监测功能、过压及压力骤升保护功能、仪器故障监测提示功能、开门暂停保护功能、异响监测功能、急停按钮保护等。
- 非接触式中红外测温技术结合非接触式高精度多光纤测压技术及扫描整合分离技术，实现了所有消解罐单独测温、测压的功能
- 微波稳定，加热均匀：360° 连续旋转，非脉冲式连续微波智能调节模式，微波输出稳定高效

气体发生器

氢气发生器 氢空一体机



1. 氢气纯度: 99.999%
2. 氢气流量: 0-300ml/min
3. 氢气压力: 0.4MPa
4. 空气流量: 0-2000ml/min
5. 空气压力: 0.4MPa

氮气发生器 氮空一体机



1. 氮气纯度: 含氧量小于 3ppm 露点-56℃
2. 氮气流量: 0-300ml/min
3. 氮气压力: 0.4MPa
4. 空气流量: 0-2000ml/min
5. 空气压力: 0.4MPa

空气发生器 氮氢空一体机



1. 氮气纯度: 含氧量小于 3ppm 露点-56℃
2. 氮气流量: 0-300ml/min
3. 氮气压力: 0.4MPa
4. 氢气纯度: 99.999%
5. 氢气流量: 0-300ml/min
6. 氢气压力: 0.4MPa
7. 空气流量: 0-2000ml/min
8. 空气压力: 0.4Mpa

超声波细胞粉碎机，高通量组织研磨仪，高压均质机

超声波细胞粉碎机



能够破碎各类动植物组织、细胞、细菌，同时可用来乳化、分离、分散、提取及加速化学反应等等。
频率 20~25KHz
功率 20-1000W 可调
样本处理量 100 μl~600ml
随机变幅杆 Φ6mm
可选配变幅杆 Φ2, 3, 10, 15mm
工作模式 间歇/连续
占空比 0.1-99.9%
温度报警 0~99.9℃
警报超温、过载、时间
定时 1~999min
存储数据 20 组
显示方式 7 英寸 TFT 触摸屏
显示内容 时间、功率、温度
注: 标配钛合金换能器

高通量组织研磨仪



支持对包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等多种样本的原始 DNA、RNA 和蛋白质进行提取和纯化。支持干磨、湿磨和混合研磨及均质化处理。
额定功率 80W
时间设定 1-9999s
转速/频率设定 300-2100 转 / 分 (10-70HZ)
夹具行程 34mm (垂直)
样本容量 标配: 2ml 的适配器 48 孔; 5ml 的适配器 12 孔
可选配: 5ml 的适配器 24 孔; 2ml 的适配器 24 孔; 10/15/25/50ml 研磨罐;
冷冻适配器
研磨方式 湿磨、干磨、预冷冻磨

高压均质机



设计流量(L/H): 5~8
设计最高压力: 200/2000/29000 (mpa/bar/psi)
使用压力: 180/1800/26100 (MPa/bar/psi)
操作方式: 按键
电压(V): 220
柱塞数量(支): 1
功率(kw): 1.5
主要功能: 均质、破壁、细化 (可选配冷水机控温)
最小处理量 (mL): 15
产品过程粘度: ≤2000cp
最大进料颗粒尺寸: 100μm
工作压力显示: 压力表
控制方式: 手动操作
最大产品进料温度: ≤90℃
重量 (KG): 110



S-Service 服务
标准化服务体系



T-Technology 技术
一流的技术服务团队



P-Product 产品
品种齐全, 省钱省心

旋转蒸发仪



适用于蒸发、蒸馏及分离化学药品实验。可与真空泵、循环冷却器组成配套系统，满足实验和生产条件。1、采用“PTFE+氟橡胶双重密封圈”设计，保证系统密封性；2、旋转瓶浸入角调整装置，操控方便；3、旋转轴快速锁定按钮设计，让组装与拆卸方便快捷；4、电动升降；5、同步带传动机构，运行平稳、噪音低；6、主机与浴槽分离，配置灵活。

多种处理量可供选择，还有防爆型号可供选择。

氮吹仪

氮吹仪主要应用于大批量样品的浓缩制备，如药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。工作原理：通过将氮气吹入加热样品的表面，使样品中的溶剂快速蒸发、分离，从而达到样品无氧浓缩的目的，保持样品更纯净。使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩，能同时浓缩几十个样品，使样品制备时间大为缩短，并且具有省时，易操作，快捷的特点。

干式氮吹仪



- 每条吹扫针可独立控制，有 24 个气道控制开关，不浪费气体；
- 加热器使样品被快速有效地加热至蒸发温度，同时气体由气腔经气针吹至溶液表面，促进溶液快速蒸发和样品浓缩；
- 整个工作系统由可调节的气体腔和加热器组成；
- 气针在气腔的位置可被改变，使之适用不同的试管。标准气针长度为 150mm；
- 气腔高度可根据溶剂液面高度调节，在浓缩有毒溶剂时，整个系统可置于通风柜中；
- 自动故障检测及报警功能；
- 标准配备气腔和专用可调节支架；
- 内置超温保护装置；
- 即时温度显示、时间递减显示。

水浴氮吹仪



- 分配室上各气针通道可组合使用或单独使用，每一路气针均可单独开关。分配室的高度可视需要调节；
- 每一路气体流量可单独进行调节，满足用户的不同需求。同时克服了不可调氮吹仪各气路气流量大小不一的弱点。独特的自平衡悬挂升降系统，设计巧妙，使分配室的高度调节更加灵活；
- 数字温控器，双数字显示，调节采用 PID 技术并可实现超温报警；
- 可能与溶剂接触的部件均采用 316 不锈钢材料，使用寿命长且清洁方便；整机可放入通风橱中使用；
- 每种型号均可选配气体流量计和调压阀；
- 一般标配的试管架规格为孔径 $\Phi 16.5\text{mm}$ ，特殊规格用户可提前预定其特殊孔径及排列方式。

微生物限度检查仪，集菌仪

微生物限度检测仪（三联，六联）



将供试品注入微生物限度培养器内，通过检测仪自带内置液泵直接抽滤，将供试品中微生物截留在滤膜上，将滤膜取出后贴在相应的器皿上然后置于相应的恒温培养箱内培养并计数。

智能集菌仪



配合集菌培养器构成无菌检测系统，通过集菌仪的定向蠕动加压作用，供试品被转移至培养器杯体内并正压过滤，过滤后冲洗滤膜去除产品的抑菌性（如有必要），然后在过滤器内灌装培养基进行培养，以检验供试品是否含菌。

药物溶出仪

全自动溶出取样系统



严格按照《中国药典》和《美国药典》规定全新设计制造的高性能的 12 杯 12 杆溶出度试验装置，智能化程度高、结构先进、控制准确、可靠性好。PC 杯板与水浴箱一体式设计，外形美观大方，便于多角度观察试验进程。耐高温，耐腐蚀，延长使用寿命。

适用方法：《中国药典》第一法（篮法）、第二法（桨法）、第三法（小杯法）选配、第四法（桨碟法）选配、第五法（转筒法）选配。

投药方式：序列投药、同步投药。

转速分区：（6+6）2 个工作区，可同时完成 2 批溶出试验。

智能取样架可根据溶媒体积自动升降，并且具有杯内温度实时监测等功能。

药物溶出仪



用于检查药物片剂或胶囊剂等固体制剂在规定溶剂中溶出的速度和程度。

标配桨法、篮法 2 种溶出试验方法，可选配小杯法、碟法（大碟、小碟）、转筒法（长筒、短筒）等 3 种溶出试验方法。

采用自动定高离合器，无须人工对转杆进行定高。适用不同试验方法，更换不同试验装置后，无须重复定高。

性能指标完全符合《中华人民共和国药典》（2015 版）、中华人民共和国制药机械行业标准》（JB/T20076-2013）的规定和国家药监局关于药物溶出度仪机械验证指导原则(2016 年第 78 号)

磁力搅拌器，分散均质机

顶置式搅拌器	普通型、多工位、加热型磁力搅拌器	高速分散均质机/剪切乳化
采用直流无刷电机，可长时间运行，搅拌量（H₂O）20L 40L 60L 可选，转速范围 30-2200rpm 	多工位搅拌量：1000ml *12 1000ml*8 1000ml*6 1000ml*4 500ml *12 500ml*8 500ml*6 500ml*4 加热型最高温度可达 350℃ 	转速最大可达 23000r/min 处理量最大可达 40L 

酶标仪 / 洗板机，PCR 仪

酶标仪	洗板机	光吸收全波长酶标仪
 最多可同时配置 8 块滤光片，检测波长范围 340-850nm，更有孵育和震荡功能以应对复杂的实验检测条件。	 采用双泵结合的设计，具有 9 档可调的吸液和排液速度设置。文件夹形式管理使得多项目管理更加清晰。能与酶标仪、转板系统组成自动化体系。	 无光纤光路，光栅单色器，波长自由选择； 闪烁氙灯，寿命长，发光稳定，冷光源，无需预热即可测试；
多功能酶标仪	化学发光酶标仪	荧光定量 PCR 分析仪
 1、适用于荧光、光吸收、化学发光测试，具有多种拟合曲线进行分析； 2、适用于蛋白酶与激酶、磷脂酶、NADH、GST 活性测试； 3、适用于细胞活性和细胞毒性测试，蛋白质定量分析；	 1、波长响应范围：300nm-650nm； 2、微孔板类型：96、384 孔； 3、读取模式：终点法、双读取模式、动力学； 4、灵敏度：7amol ATP/孔； 5、振板方式：线性、圆周、十字震荡； 6、温控范围：（室温+2℃）到 65℃； 7、检测器：光子计数光电倍增管；	 样本容量 96X0.2mL【可适用于单管，8 连排管和 96 孔板】 动态范围 1~1010 Copies/L 控温方式 模块控制（Block）& 模拟试管控制（tube） 控温技术 半导体热电制冷器 最大升降温速率 6.5℃/s 梯度控制段 6 分区控温 热盖温度范围 30-110℃（可调，默认 105℃）

电泳仪，凝胶成像分析系统，化学发光成像分析系统

琼脂糖水平电泳仪



适用鉴定、分离、制备 DNA，及测定其分子量

* 可充分满足 PCR 电泳 96 孔的快速一次完成，并方便 8 道移液器的使用

* 专用制胶器，制胶方便

* 透明上盖设计，方便观察

外型尺寸 (L × W × H): 360 × 195 × 135mm

凝胶板规格 (L × W): 200 × 160mm; 150 × 160mm

试样格 17、34 齿 1.5mm 厚 可用排枪加样 重量 1.5kg

缓冲液总容量 1000ml

双垂直电泳仪



用于蛋白凝胶电泳。

外型尺寸 (L × W × H): 175 × 163 × 165mm

凝胶板规格 83 × 73、83 × 95mm

试样格

10、15 齿，1.0mm 厚

10、15 齿，1.5mm 厚

重量 1.0kg

缓冲液总容量 730ml

全自动凝胶成像分析系统



采用高分辨率高灵敏度 CCD，可轻松获得高质量图像，新型密闭式自动控制暗箱结构紧凑，配有各种波长光源，功能强大。

可应用于各种紫外和蓝光激发样品的拍摄。

一体式化学发光 / 荧光 / 凝胶成像分析系统



适用于各种荧光染色样品的拍摄。

检测样本：化学发光 / 多色荧光 / 核酸凝胶 / SDS-PAGE 凝胶 / 胶片 / 微孔板等。

液氮罐，超低温冰箱

大口径方提桶系列液氮罐

便携式系列液氮罐

航空运输系列液氮罐



大口径系列液氮罐是专为中等范围储存容量的生物样品而设计的一种大容量储存型液氮罐，该类液氮罐主要适用于生物医疗、干细胞大量储存及生物科研的大量储存及应用。

便携式小容量系列专为具有小容量需求的用户而设计，主要用于畜牧冻精配种和生物样本的便携式运输。

航空运输系列适用于深低温环境下(气相储存，温度低于 -190℃) 运输样本，可避免运输过程中液氮释放的危险，尤其适用于飞机等短时间航空运输。

超低温冰箱



产品适用范围：可用于病毒、细菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、精液、生物制品、远洋制品、电子器件以及特殊材料的低温储存；适用于血站、医院、疾病预防控制中心、科研院所、电子化工、生物工程、军工企业、远洋渔业公司等。

精准温控 安全可靠

- 微电脑温度控制，箱内温度 -10℃ ~ -86℃ 可调；
- 高效制冷系统，国际知名品牌高效压缩机；
- 无氟制冷剂，绿色环保；
- LBA 发泡保温技术，门体双重密封设计
- 优化蒸发器管路设计，确保箱内温度均匀性；
- 独特散热系统，采用国际知名品牌风机，性能稳定持久、噪音低。

拉力试验机

微机控制电子万能试验机



规格: 100N-30KN (加配传感器可做到 0N-30KN)
准确度等级 0.5 级
试验力测量范围 0.4%~100%FS (满量程)
位移控制速率 0.001~500mm/min
用途: 主要用于金属、非金属材料的试样拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等力学性能测试和分析研究。
适用标准: GB、ISO、DIN、ASTM、JIS 等国际标准。
 可自动求取 ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E 等试验参数。
 该机型有单空间和双空间两种机型, 可选环境试验装置。

电子拉力试验机



量程范围 500 N (标配)
 30 N、100 N、1000 N、1500 N (可选)
精度 优于 0.5 级
分辨率 0.0001 N **位移精度** 0.5 级
位移分辨率 0.1 mm
试验速度 1~800 mm/min (无级调速)
试样宽度 50 mm (标配) 30mm (可选)
行程 1000 mm
标准配置: 主机、微型打印机、气动夹具、专业软件、通信电缆、微型打印机

电化学工作站

分为单通道、多通道, 多种电化学测试功能可供选择: 稳态极化, 暂态极化, 计时分析, 伏安分析, 电流检测, 溶出伏安, 交流阻抗, 充放电测试, 双恒测量, 各种扩展测量等。

双恒电位仪 (双通道电化学工作站)



可以实现 2 个通道同步测试, 搭配旋转环盘电极 (RRDE) 使用。

- 不仅仅是双恒电位仪
- 双通道电化学工作站, 各通道独立测试, 性价比高
- 经典应用: 盘环电极测试 (RRDE)、氢扩散测试 (HDT)
- 全浮地模式, 性价比高
- 电压控制范围: $\pm 10V$, 槽压为 $\pm 21V$
- 电流控制范围: $\pm 1A$ (可扩展至 20A/40A/100A)
- 电位分辨率: $1 \mu V$, 电流分辨率: $1pA$ (可选 $100fA$)

单通道电化学工作站



全浮地式设计, 具有出色的稳定性和精确度, 性价比高, 具备所有电化学测试功能。

- 新增 IR 补偿功能、恒流阻抗测试技术
- 功能全, 应用领域广
- 电压控制范围: $\pm 10V$, 槽压为 $\pm 21V$ (可选 $30V$)
- 电流控制范围: $\pm 2A$ (可扩展至 20A/40A/100A)
- 电位分辨率: $1 \mu V$, 电流分辨率: $1pA$ (可选 $100fA$)

多通道电化学工作站



多通道电化学工作站为用户提供更为高效的测试平台。

- 各通道独立测试, 隔离性好
- 灵活选择功能模块, 性价比高
- 电压控制范围: $\pm 10V$, 槽压为 $\pm 21V$
- 电流控制范围: $\pm 1A$ (可扩展至 20A/40A/100A)
- 电位分辨率: $1 \mu V$, 电流分辨率: $1pA$ (可选 $100fA$)

通道数量可定制。常规 4~8 通道。如需定制, 请来电咨询。每个通道包含电化学腐蚀测试功能、电池测试功能等, 阻抗选配。




示波器/万用表


泰克、是德、罗德与斯瓦茨、普源、鼎阳、优利德示波器



100 MHz, 4 个模拟通道
4 Mpts 存储器和 1,000,000 波形/秒的捕获率

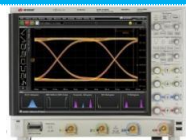

500 MHz, 4 个模拟通道和 16 个数字通道, 高达 20 GSa/s 的采样率和每通道标配的 50 Mpts 存储器

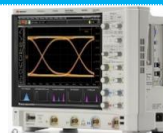

1 GHz, 4 个模拟通道, 高达 20 GSa/s 的采样率和每通道标配的 50 Mpts 存储器, 10 位模数转换器

优利德台式数字万用表



UT8806 读数分辨率 6%
UT8805A 读数分辨率 5%
UT8804N 读数分辨率 4%
UT8803N 读数分辨率 3%

优利德数字万用表



万用表用来测量被测量物体的电阻, 交直流电压、交直流电流。还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量, 电感器的感值, 电压频率及占空比, 物体的温度等。

优利德数字电桥



测量交流电阻 R、电感 L、品质因数 Q、电容 C 及其损耗因数 D。选型要考虑被测器件的最高频率、测试精度、测试速度以及是否具备 DCR 测试功能等。

试剂耗材

化玻类



试剂标准溶液/试剂盒类



瓶装 PH 标准缓冲溶液



化学试剂



国家有色金属标准溶液



PCR 检测试剂盒



Elisa 试剂盒

微生物检测：培养基、菌种、染色液



平板计数琼脂
营养琼脂
胰蛋白胨大豆琼脂



HE 琼脂
亚硫酸铋琼脂
孟加拉红琼脂



金黄色葡萄球菌
铜绿假单胞菌定性
控标准菌株



大肠埃希氏菌
枯草芽孢杆菌
生孢梭菌



白色念珠菌定性
质控菌株
黑曲霉

				
卵黄亚碲酸钾增菌液	革兰氏染色液	0.5%无菌 TTC 溶液	芽孢染色液	蛋白质毒素结晶体染色液

生物试剂耗材

				
离心管	冻存管	一次性手套	细胞培养瓶	细胞培养板
				
细胞培养皿	PCR 管	PCR 板	酶标板	三角培养摇瓶

小型仪器

定量可调加液器 1/5/10ml (白瓶、棕瓶可选), 可耐受 120° C/250° F 的高温高压灭菌	涡旋混匀仪	多管漩涡混合仪, 最多可处理 50 个样品	微孔板振荡器, 可放 4 个标准酶标板和微孔板
			
轨道式摇床 转速 50—350rpm	翘板摇床 可以直接放在温室内或培养箱内	生物指示剂培养器, 灭菌效果的检测培养	红外接种环灭菌器, 温度高达 800℃ 以上
			
微孔板恒温器	气流烘干机 快速烘干玻璃器皿	隔膜真空泵	循环水真空泵
			
			电热恒温水浴锅
			

Since 1972 “世界天平之子”

ADAM

英国艾德姆

“罗拉 LUNA”系列基础型电子天平

“性价比之王”



现在
长达

5年

保修期

授科仪器
Soke17.com

英国艾德姆十万分位半微量天平

触摸屏系列	型号	量程	精度	图片
	EAB125i	62g/120g	0.01/0.1mg	
	EAB225i	82g/220g	0.01/0.1mg	
液晶屏系列	型号	量程	精度	图片
	SAB125i	62g/120g	0.01/0.1mg	
	SAB225i	82g/220g	0.01/0.1mg	

备注

全自动智能校准，5年保修期

总代理：广州市授科仪器科技有限公司


www.soke17.com



快速加热
400瓦卤素灯管快速加热样品

称盘拾取器
称盘拾取器可轻松放置和移除测试样品

测试结果清晰可见
LCD液晶显示屏，易于读取数据，内置量程超载保护，避免过载

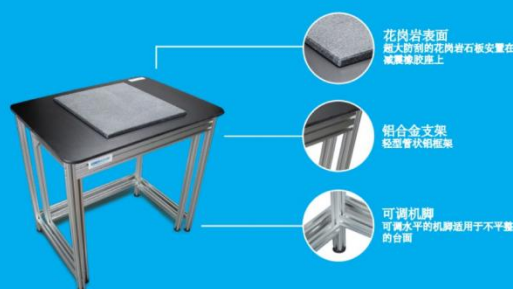

花岗岩表面
超大的花岗岩表面安装在
减震橡胶座上

铝合金支架
轻盈且坚固耐用

可调机脚
可调节高度的机脚适用于不平
的台面

Soke 广州市授科仪器科技有限公司

销售服务热线：020-31801373

官网：www.soke17.com

化学分析仪器、生物分析仪器、试剂耗材、物理类检测仪器、
电学检测类仪器仪表一站式解决

邮箱：sokeyq@yeah.net，sokeyq@163.com

地址：广州市天河区东圃一横路 13 号汇宝商业中心 B 区 1A015 房

