

PMB水份分析仪



艾德姆PMB系列是一款反应快速，操作简便，功能多样的水份分析仪。内置检测设定系统能快速设定检测模式，即使称量多种不同样品，也能快速简单。存储系统能够进行数据存储和读取。PMB诸多灵活特性使它在水份分析上表现卓越。

PMB系列还为水份分析仪开创了新标准。独创的USB接口实现了水份分析仪和存储盘直接进行数据对接，而这一过程无须使用任何其他软件，为用户的数据采集提供更多的便利。

艾德姆35年的仪器制造经验，始终立志于为用户提供多用途，多性能的高质量产品，为您打造快速，准确，物超所值的完美典范。



OHAUS[®]
艾德姆衡器

PMB 独特性能

功能导航和直观按键设计使得天平操作更简单：用户能快速进入主菜单并根据提示对其进行操作。同时用户还能设置特殊管理权限，管理员能够设置所有操作或者特定操作的使用权限，防止其他用户更改设定值。

多种数据接口让您在数据传输上有更宽泛的选择：PMB同时标配USB和RS232两种接口。此外USB闪存系统设置能够自动存储每一个测量结果。

为不同的样品提供不同的测量模式：用户可自行设置检测模式并将其存储。在测量不同样品时只需轻触按键即可更改测量模式。


技术规格

型号	PMB 53	PMB 163	PMB 202
量程	50g	160g	200g
精度	0.001g / 0.01%	0.001g / 0.01%	0.01g / 0.05%
重复性误差 (S.D.)*	0.005g / 0.05% (10g 样品)	0.005g / 0.05% (10g 样品)	0.02g / 0.2% (10g 样品)
称盘尺寸	90mm Ø		
加热范围	50°C -160°C （间隔1°C）		
检测时间	最长至99分钟		
时间操作	手动停止，自动停止，时间设定，时间设定/自动		
称量单位	g (grams), 液体%, 固体%, ATRO % M (percent moisture / dry bases) ATRO % S (percent solids / dry bases)		
显示语言	英语，德语，法语，西班牙语		
稳定时间	2-3 秒		
接口	USB Host, USB I/O, RS-232		
内置存储器	存储99种检测结果 49种检测模式		
外置存储器	外接USB能够存储检测模式和检测结果		
校准	外部校准		
加热源	400W 卤素灯加热		
加热模式	斜坡式，阶梯式，标准		
显示屏	LCD背光大显示屏，附带量程跟踪指示		
电源	110v / 220v 50/60hz		
操作温度	32° -104°F / 0° - 40°C		
整体尺寸(LxWxH)	360 x 250 x 185mm		
净重	6kg		

*重复性误差百分比数据以10g样品为准

PMB 使得水份分析更快速，结果更准确！

- 特性：
- 标配双USB接口：USB HOST接口用于存储卡连接；USB I/O接口用于连接电脑
 - 标配RS-232接口
 - 内置存储系统用于存储检测结果和检测模式。
 - 3种加热方式：斜坡式，阶梯式，标准式
 - 当翻盖关闭时能自动进行检测
 - 称盘支架的设计能轻松移取样品
 - 超大显示屏提供双排数据显示和量程跟踪显示
 - 内置金仕顿安全锁孔

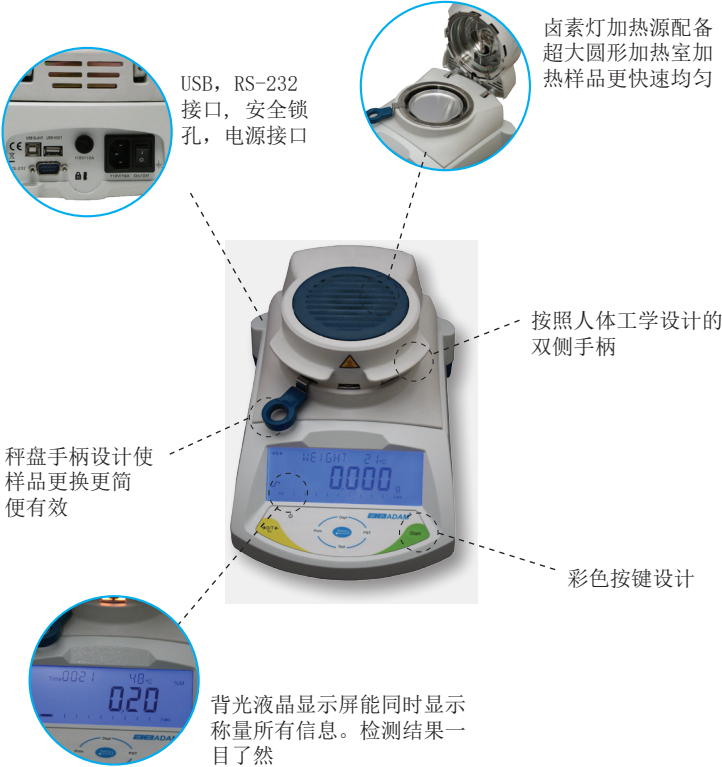

配件

- 金仕顿锁及线缆
- RS-232 数据线
- USB数据线
- USB存储器
- AdamDU 数据采集软件
- Adam 打印机
- 打印纸